

Afterwards please tighten the 3 screws again and put the handle onto the edge of the bathtub.

Make sure that the upper plate is solidly seated on the rim of the bathtub.

Now fasten the adjusting knob till the movable Pad-1 perfectly fits at the inner surface of the bathtub. Tighten the adjusting knob as strong till HUGO cannot be moved anymore and is trapped completely (Picture 3).

Picture 3



Bathtub without 100% flat outer surface at the edge of the tub

In that case use the included self-adhesive plates to close the gap to ensure that the outer rubber-pad gets a maximum contact surface, too. Therefore remove the protective foil of a plate and stick it onto the place where the gap exists. If one plate is not enough, use plate 2 and if necessary plate 3.



HUGO

Der Badewannengriff

Art. Nr. HUGO 1000

Gebrauchsanweisung



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Badewannengriffes. Dieses Produkt begleitet Sie durch Ihr tägliches Leben. Bewährt und praktisch hilft er Ihnen schnell, bedingt durch seine einfache Anbringung und Funktionalität.

Unsere Produkte wurden entworfen und hergestellt unter Beachtung der Qualitätsnormen und Sicherheitsvorschriften sowie zusätzlich entsprechend der EG-Richtlinie 93/42/EWG.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung vor Benutzung des Produktes aufmerksam zu lesen. Werfen Sie sie danach nicht weg, damit Sie diese später weiter benutzen können.



Mounting of HUGO at the bathtub


IMPORTANT: First inspect the surface where you are going to fasten the handle. Take care that the surface is completely dry and free of soap or other slippery substances!

To find the right position for the handle please sit down into the dry bathtub to check the reaching area of your hands and at which position the handle supports you the best.

Now loosen the adjusting knob till Pad-1 is in a position that HUGO fits completely onto the edge of your bathtub.


If the distance between the two pads is still not wide enough, loosen the upper 3 screws with the small Allen wrench and pull out the metal plate as far as necessary so that the handle fits completely onto the edge.
(Picture 2.)

Picture 2

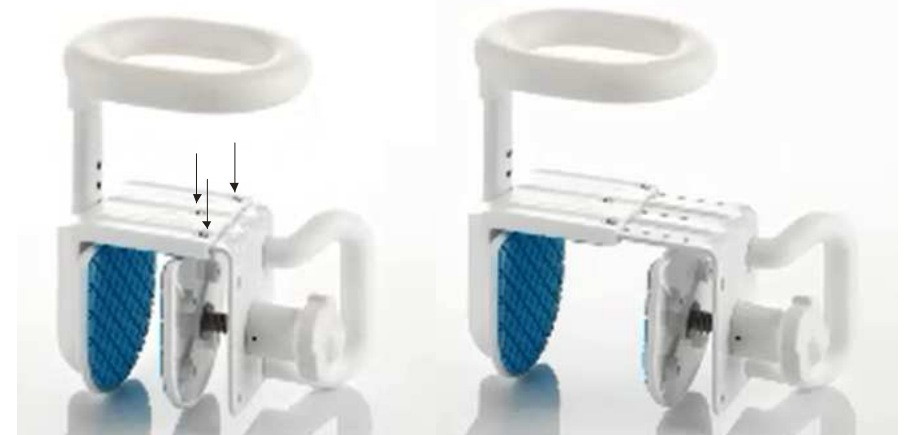

This grip can be fixed on the left or right side of the metal plate!
It depends on your position in the bathtub and where you need the grip.

HUGO is now ready for mounting onto the bathtub

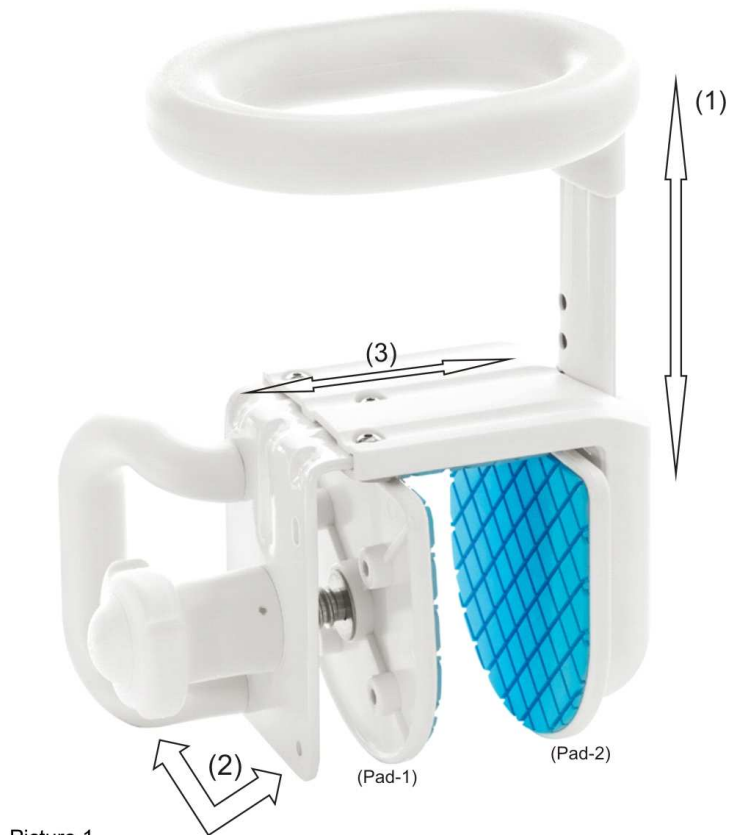

Picture 1

Vorabhinweis:

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen gut begriffen haben, bevor Sie das Produkt das erste Mal installieren oder gebrauchen. Wenn Sie die Hinweise, Warnhinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung nicht verstehen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Suchen Sie Rat bei Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten um sicherzustellen, dass dieses Produkt für Sie geeignet ist und Ihren Bedürfnissen entspricht. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie den Rat und eine Schulung durch den Fachmann erhalten haben.

Gewährleistung

Auf dieses Produkt ist eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegeben. Bewahren Sie die Rechnung gut auf, die Ihren Nachweis für den Kauf darstellt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch falschen Gebrauch oder auf Nichtbeachtung der Benutzungshinweise entstanden sind, oder auf Unfälle, die durch falsche Reinigung oder durch kommerziellen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Instandsetzung entstanden sind oder durch nicht zur Reparatur berechnigte Personen ausgeführt wurden. Während der Garantiezeit wird das Gerät kostenlos repariert oder kostenfrei ersetzt.



Technische Daten:

Belastbar bis:	120 kg vertikal und horizontal
Gewicht des Produktes:	2,5 kg
Klemmbreite:	verstellbar von 2,9-13,5 cm
Griffhöhe:	verstellbar von 8,0-14,0 cm
Material:	Kunststoff, Edelstahl, Antirutschgummi

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

- Vor der ersten Anbringung bzw. Montage kontrollieren Sie die verschiedenen Bauteile des Badewannengriffs auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und auf Vollständigkeit.
- Achten Sie unter allen Umständen auf die maximale Belastungsgrenze.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand des Produktes. Wenn die Bauteile mangelhaft, abgenutzt oder beschädigt sind, müssen diese unverzüglich durch eine autorisierte Person ersetzt werden.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem feuchten Schwamm, milder Seife und einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel. Trocknen Sie es mit einem trockenen weichen Lappen ab.
- Verwenden Sie weder eine Bürste noch Scheuermittel oder Scheuermittelpulver. Für die Desinfektion in einer Krankenhauseinrichtung verweisen wir auf den Hygieneverantwortlichen in der Einrichtung.



Implementation - Using instructions

The bathtub handle HUGO is essential for persons who have difficulties in controlling their balance. HUGO offers you safety and best comfort in your daily living. With the possibilities in the height and width adjustment the bathtub handle can be mounted optimally onto the edge of your bathtub. Fix the bathtub handle onto the edge of your bathtub.

Scope of delivery-set

- 1x clamping device with blue rubber-pads
- 1x main handle with tube for height adjustment
- 1x small, white side-grip
- 1x welded bag with: 2 Allen wrench / 2 short, 2 long screws
4 washers / 2 white cover plugs
- 1x welded bag with: 3 self-adhesive spacer plates

Assembly (Picture 1)

1. Please insert the *main handle with tube* into the upper hole of the clamping device as shown in Picture 1 (1). Adjust the handle to the desired height and use the big Allen wrench to tighten both long screws with washer.

Afterwards insert the white cover plugs into the screw holes.

2. Mounting of the white side-grip: First loosen Pad-1 with the white adjusting knob till the 2 smaller screws and washer can be inserted from inside through the holes in the metal plate to fix the side grip as shown in picture 1(2). Tighten the screws by using the small Allen wrench. The grip can be mounted at the desired side (left or right) to provide best support.



Technical data:

Maximum capacity:	120 kg vertical and horizontal
Weight of the product:	2.5 kg
Clamping width:	adjustable 2.9 to 13.5 cm
Height of the handle:	adjustable 8.0-14.0 cm
Material:	Plastic, stainless steel, non-skid rubber

Precautions, service and maintenance

- Inspect all parts of the bathtub handle for proper condition and completeness before mounting and using the handle the first time.
- In any circumstance pay attention to the maximum capacity of 120 kg.
- Control constantly the mechanical state of the product. If parts are defective, worn or damaged, they have immediately replaced by an authorized person.
- Clean your product continuously with a damp sponge, gentle soap and a household detergent/disinfectant. Wipe the handle with a dry soft cloth.
- Do not use a brush nor an abrasive detergent or abrasive powder. As to the disinfection in a hospital or similar establishment we refer to the responsible for hygiene in these establishments.



Anwendung - Benutzungsanleitung

Dieser Griff ist unverzichtbar für Personen, die Schwierigkeiten beim Ein- und Ausstieg aus der Badewanne haben. Er bringt Sicherheit und besseren Komfort im Alltagsleben. Durch die Möglichkeiten in der Höhen- und Breitenverstellung lässt er sich optimal an den Badewannenrand bzw. an die Badewannenkante anbringen.
Dieser Griff wird von oben auf den Badewannenrand aufgesetzt.

Lieferumfang

1x Spannvorrichtung mit blauen Gummipads
1x Handgriff mit Rohr zur Höhenverstellung
1x kleiner, weißer seitlicher Haltegriff
1x eingeschweißt im Beutel: 2 Inbusschüssel / 2 kurze, 2 lange Schrauben / 4 Unterlegscheiben / 2 weiße Abschlussstopfen
1x eingeschweißt im Beutel: 3 selbstklebende Abstandsplatten

Zusammenbau des Griffes (siehe Bild 1)

1. Bitte stecken Sie den *Handgriff mit Rohr* in die obere Öffnung der *Spannvorrichtung* in Position wie in Bild 1 (1) dargestellt und befestigen Sie ihn - in der gewünschten Höhe - mithilfe der beiden *langen Schrauben (inkl. Unterlegscheibe)* mit dem größeren Inbusschlüssel.
Anschließend können Sie die beiden Schraubenlöcher mithilfe der beiden *weißen Abschlussstopfen* verschließen.
2. Anbringung des *seitlichen Haltegriffes*: Zunächst müssen Sie mit Hilfe des seitlichen Feststellknopfes Pad-1 etwas herausdrehen, damit Sie die Schrauben (inkl. Unterlegscheibe) zur Befestigung des kleinen

Griffes von innen durch die Metallplatte stecken können – siehe Bild 1(2).

Der kleine Haltegriff kann links oder rechts angebracht werden, je nach Ihrer Position in der Badewanne und wo Sie ihn dann benötigen.

Befestigen Sie nun den Griff mithilfe der beiden kurzen Schrauben (inkl. Unterlegscheiben) auf der richtigen Seite und benutzen dafür den kleineren Inbusschlüssel.

Der Griff ist jetzt bereit für die Montage an der Badewanne.

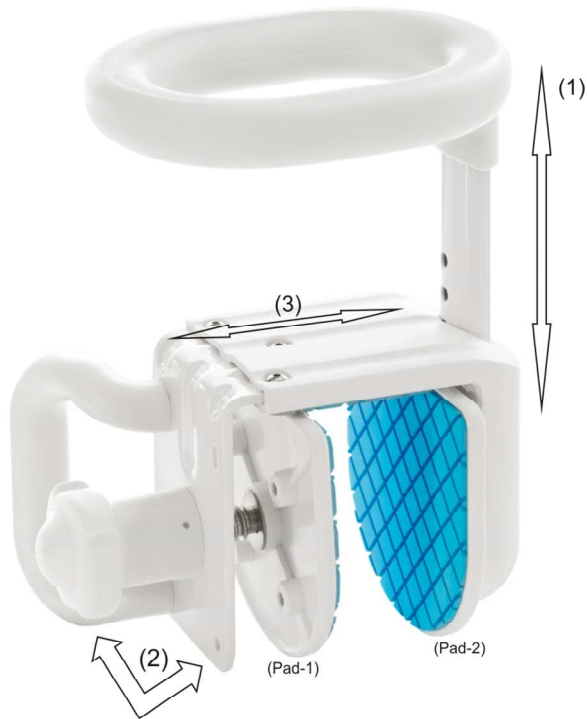


Bild 1

Instructions:

Please make sure, that all instructions were entirely understood, before mounting and using this product the first time. If there are problems to understand the notes, safety instructions, using instructions or assembly, please ask your dealer for further information to avoid any injury or material damage. Consult with your physician or therapist to ensure that this product will be suitable for you and will match your requirements. Don't use this product, before this advice or a training by a specialist was conducted.

Warranty

rehasstage GmbH offers you a 2-year warranty on this product against all defects or faults in manufacturing or materials. The warranty does not cover damage resulting from misuse, dismantling, or repair by unauthorised persons or damage resulting from non-observance of the using instructions or accidents caused by false cleaning or caused by commercial use. Standard repairs or exchanges during the warranty period will not affect the expiry date of this warranty. This guarantee in no way affects your rights under statutory law. Keep your invoice, because it confirms your purchase.

Thank you for purchasing the HUGO Bathtub Handle. This product will accompany you through your daily living. Approved and useful it is of assistance to you because HUGO is so easy to install and provides best support.

Our products were designed and produced in accordance with the existing quality standards and safety regulations and in addition according to the provision of the Council Directive 93/42/EEC for Medical Devices.

IMPORTANT: Please read the following instructions for your safety and to learn of the features of this product. Please do not use the product before you completely read these instructions. Keep this manual so that the information can be consulted again later.



Befestigung des Griffes an der Badewanne

Vor dem Anbringen des Griffes an die Badewanne müssen Sie überprüfen, ob die Fläche, auf der Sie den Griff anbringen möchten, vollständig trocken und frei von Seife oder anderen Mitteln ist!

Am besten setzen Sie sich einmal in die trockene Badewanne und testen Ihre Reichweite und an welcher Stelle Ihnen der Griff die größte Hilfe ist.

Drehen Sie nun mithilfe des Feststellknopfes Pad-1 (siehe Bild 1) so weit heraus, bis der Griff vollständig über den Badewannenrand passt. Ist der Wannenrand noch zu breit, lösen Sie die oberen 3 Schrauben mit dem kleinen Inbusschlüssel und ziehen die Metallplatte so weit heraus bis es passt (siehe Bild 2).

Bild 2



Anschließend die 3 Schrauben wieder festdrehen und den Griff auf den Wannenrand aufsetzen.

Vergewissern Sie sich, dass der Griff vollständig auf dem Badewannenrand aufliegt!

Nun müssen Sie die Feststellschraube anziehen, bis sich auch der beweglich gelagerte Gummipad vollständig dem Badewanneninnenrand angepasst hat. Ziehen Sie die Feststellschraube so lange kräftig an, bis der Badewannengriff sich nicht mehr bewegt und sicher sitzt (siehe Bild 3).

Bild 3



Badewannen mit kleinem Versatz an der Außenwand

Sollte Ihre Badewanne an der Außenwand -wegen des oberen Randes - einen kleinen Versatz und das äußere Gummipad somit keine volle Auflagefläche haben, müssen Sie die mitgelieferten selbstklebenden Abstandsplatten nutzen.

Dafür entfernen Sie die Folie der Abstandplatte, um die Klebefläche freizulegen. Kleben Sie nun die Abstandplatte(n) so an die Außenfläche der Wanne, dass auch das äußere Gummipad eine maximale Auflagefläche hat.



HUGO

The Bathtub Handle

Ref. no. HUGO 1000

Instructions for use

