

# GRIPO

## Boden-Deckenstange



# Hepro Haltestange GRIPO

Ein System – unzählige Möglichkeiten

GRIPO ist eine robuste und flexible Stütze, die beim Aufstehen und beim Bewegen zu Hause Sicherheit gibt. GRIPO ist patentiert, passt in die meisten Häuser und Wohnungen und ist sehr leicht zu montieren. Die Stützstange kann problemlos alleine eingesetzt und mit nützlichem Zubehör ergänzt werden.

- Stütze, wenn Sie sie brauchen
- Bedarfsgerechte Unterstützung der Mobilität
- Leicht zu montieren, zu versetzen und zu demontieren
- Montage ohne Schrauben, Nägel und Werkzeug
- Große Auswahl an nützlichem und flexiblem Zubehör
- Unzählige Anwendungsbereiche



## GRIPO

| Beschreibung   | Art.-Nr.  | HMV -Nr.      |
|----------------|-----------|---------------|
| Gripo Komplett | 35035 200 | 04.40.05.2013 |
| Gripo Spezial  | 35202     |               |
| Gripo Lang     | 35210     |               |



## GRIPO Zubehör



### Rotierender Griff - **NEU!**

Wird mit der Drehhalterung geliefert. Kann mit dem Universalanschluß 22/40/22 mm montiert werden, wenn die Drehfunktionen nicht erwünscht ist. Kann 360 Grad um die Stange gedreht werden.

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 35035 315 |



### Ringgriff - **NEU!**

Mit Moosgummi. Erhältlich in zwei Größen: 30 cm und 40 cm Durchmesser. Universalanschluß 22/40/22 mm.

| Größe | Art.-Nr.  |
|-------|-----------|
| D30   | 35035 281 |
| D40   | 35035 280 |



### Griffbügel Triangel


Mit Moosgummi und Universalanschluß 40/22 mm. Bei Montage in der richtigen Höhe auch als Stirn-/Kopfstütze einsetzbar.

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 35035 145 |



# GRIPO Zubehör

## Stützbügel mit Hängegriff

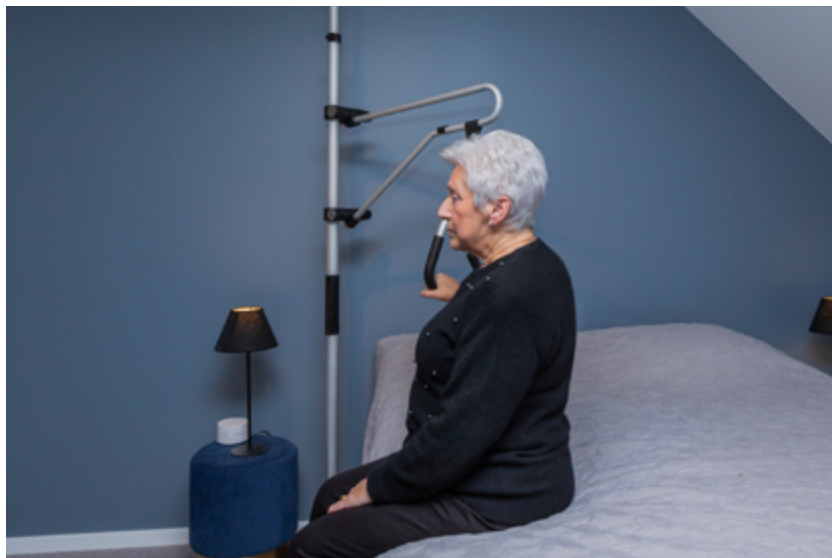

### Vorteile des GriPO Stützbügel:

- Stützt dort, wo es erforderlich ist.
- Gibt ein Gefühl der Sicherheit.
- Entlastet Pflege-/Hilfspersonal und kann dadurch Belastungsschäden mindern.
- Aktiviert den Benutzer und regt den Kreislauf an.
- Unterstützt bei Lage- und Haltungsänderungen im Bett.
- Spart Kosten, da der Benutzer und seine Angehörigen viele Tätigkeiten ohne Unterstützung durch Pflegepersonal bewältigen können.



### Stützbügel mit Hängegriff

Mit 2 Universalanschlüssen  
40/22 mm.  
Länge: 68,5 cm.  
Hängegriff mit Moosgummi und  
Riemen.

Art.-Nr.

35035 148



### Stützbügel

Ohne Riemen und Haken.  
Mit 2 Universalanschlüssen  
40/22 mm.  
Länge: 68,5 cm.  
Keine losen Teile. Stütze beim  
Aufstehen und Gehen z.B. zur Toilette.

Art.-Nr.

35035 196



## GRIPO Zubehör



### Mini-Griff, senkrecht

Rohrdurchmesser 22 mm, Länge 75 cm. Mit zwei Universalanschlüssen 40/22 mm. Kann eine Alternative für diejenigen sein, für die die Gripostange zu dick ist, um sich daran festzuhalten. Wird parallel zur Gripostange angebracht.

Art.-Nr.

35035 158



### Beidhändiger Griff

Mit Moosgummi und Universalanschlüssen 40/22 mm. Breite/Grifffläche 48 cm, Rohrdurchmesser 22 mm. Erleichtert das Aufstehen von einem Stuhl/Bett. Vereinfacht Übergang zum/vom Rollstuhl. Bei Verwendung von 2-3 Griffen in unterschiedlichen Höhen montiert, kann der Nutzer durch den Klettereffekt die Stehfunktion trainieren.

Art.-Nr.

35035 159




### Kombigriff

Mit Universalanschlüssen 40/40 mm. Guter Zweihandgriff für Personen mit großen Händen. Sehr stabil (verdrehen sich nicht). Kann für Griffe in 2 Höhen (Klettern) verwendet werden. Kann zum Anlehnen beim Aus- und Anziehen verwendet werden.

Art.-Nr.

35035 208

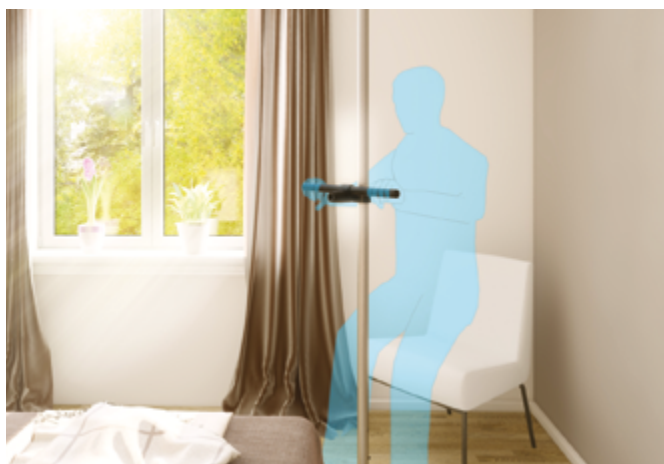



# **GRIPO Zubehör**

## Geländerrohr



### **Geländerrohr**

Zwei Größen 40 und 22 mm, 100 cm Länge. Universalanschlüsse sind separat zu bestellen. Montage zwischen 2 Haltestangen in niedriger Position. Bietet Halt und Sicherheit beim Aus- und Anziehen.

| Größe | Art.-Nr. |
|-------|----------|
| 22 mm | 35321    |
| 40 mm | 35322    |

### **Geländerrohr Durchmesser 22 mm**

100 cm lang, mit Moosgummi. Universalanschlüsse sind separat zu bestellen. Kann schräg montiert werden, z.B. als Handlauf auf kleinen Treppen oder Niveauunterschieden. Wird im Badezimmer, am Waschbecken oder an der Toilette zwischen 2 Stangen montiert.

| Art.-Nr. |
|----------|
| 35323    |

### **Geländerrohr Durchmesser 40 mm**

160 cm lang. Universalanschlüsse sind separat zu bestellen. Als Handlauf zwischen 2 Haltestangen montiert. Für Räume mit hoher Schwelle, die der Benutzer mit z. B. Rollstuhl nicht betreten kann. Trägt dazu bei, dass Sie sich allein bewegen können. Kann nacheinander als langer Handlauf zwischen mehreren Haltestangen installiert werden.

| Art.-Nr. |
|----------|
| 35152    |



## GRIPO Zubehör



### Klappsitz

Mit Universalanschluß 40/40 mm.  
Breite 36 cm, Tiefe 40 cm.  
Max. Körpergewicht 110 kg.

Art.-Nr.

35035 154



### Armlehne, Seitenstütze

Breite zwischen den Armlehnen 56 cm.  
Mit Universalanschluß 40/40 mm.  
Kann mit Klappsitz kombiniert werden.

Art.-Nr.

35255



### Rechteckiger Tisch

Maße, 41 x 31 cm.  
Mit Universalanschluß 40/40 mm.  
Auch als Computertisch geeignet.

Art.-Nr.

35035 165





## Technische Anforderungen und Details

| Gripo                               |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anforderungen an Deckenhöhe         | Min. 210 cm – max. 300 cm                        |
| Anforderungen an Deckenkonstruktion | Muss einer Punktbelastung von 100 kg standhalten |
| Körpergewicht                       | Max. 210 kg                                      |
| Material                            | Aluminium und glasfaserverstärktes Polyamid      |
| Produkt-Eigengewicht                | 4,7 kg, ohne Zubehör                             |

## Artikelnummer-Übersicht

### Gripo

| Art.-Nr.  | HMV -Nr.      | Beschreibung                                                                 | Spezifikation                                             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 35035 200 | 04.40.05.2013 | Gripo Komplett                                                               | Für Deckenhöhen 210 – 300 cm<br>Max. Körpergewicht 210 kg |
| 35202     |               | Gripo Spezial                                                                | Für Deckenhöhen unter 210 cm<br>Max. Körpergewicht 210 kg |
| 35210     |               | Gripo Lang, 15 cm längeres Außenrohr für die Montage von Zubehör weiter oben | Für Deckenhöhen 260 – 320 cm<br>Max. Körpergewicht 210 kg |



### Rotierender Griff

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                | Spezifikation                                                          |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 35035 315 | Kann 360° Grad um die Stange gedreht werden | Montiert 44,5 cm Abstand zur Haltestange.<br>Max. Körpergewicht 110 kg |





# Artikelnummer-Übersicht

## Ringgriff

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                                                                                                        | Spezifikation                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 35035 281 | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sich um die Stange herum zu bewegen und jederzeit einen festen und stabilen Haltepunkt zu haben. | Ringgriff D30 (Ø30 cm)<br>Max. Körpergewicht 110 kg |
| 35035 280 | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sich um die Stange herum zu bewegen und jederzeit einen festen und stabilen Haltepunkt zu haben. | Ringgriff D40 (Ø40 cm)<br>Max. Körpergewicht 110 kg |



## Universalanschluß mit schrittweiser Drehung

| Art.-Nr.  | Beschreibung             | Spezifikation        |
|-----------|--------------------------|----------------------|
| 35035 130 | Standard mit Zahnscheibe | Durchmesser 40/22 mm |
| 35169     | Mit Zahnscheibe          | Durchmesser 40/40 mm |
| 35199     | Mit Zahnscheibe          | Durchmesser 22/22 mm |



## Universalanschluß mit freier Drehung

| Art.-Nr. | Beschreibung    | Spezifikation        |
|----------|-----------------|----------------------|
| 35160    | Mit Zahnscheibe | Durchmesser 40/22 mm |
| 35166    | Mit Zahnscheibe | Durchmesser 40/40 mm |



## Universalanschluß mit Empfang Zum einfachen Anheben und Absenken des Handlaufrohres

| Art.-Nr. | Beschreibung                | Spezifikation        |
|----------|-----------------------------|----------------------|
| 35161    | Endstopper für Geländerrohr | Durchmesser 40/22 mm |
| 35167    | Endstopper für Geländerrohr | Durchmesser 40/40 mm |



## Stützbügel mit Hängegriff

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                                                         | Spezifikation                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 35035 148 | Komplett mit 2 Universalanschlüssen 40/22 mm, Aufhängegriff mit Moosgummi und Riemen | 68,5 cm Abstand zur Haltestange<br>Max. Körpergewicht 110 kg |



## Stützbügelrohr für Seitenstütze

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                              | Spezifikation                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 35035 196 | Mit Schiebepstoppern und 2 Universalverschlüssen 40/22 mm | 68,5 cm Abstand zur Haltestange<br>Max. Körpergewicht 110 kg |



## Griffbügel, Triangel

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                  | Spezifikation                                      |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 35035 145 | Mit Moosgummi, mit Universalanschluß 40/22 mm | Rohrdurchmesser 22 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |



## Kombi-Griff

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                 | Spezifikation                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 35035 208 | Komplett mit 2 Universalanschlüssen 40/22 mm | Höhe 24 cm, Länge 30 cm<br>Rohrdurchmesser 22 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |



## Beidhändiger Griff

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                           | Spezifikation                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 35035 159 | Mit Moosgummi, komplett mit Universalanschluß 40/22 mm | Breite, Grifffläche 48 cm<br>Rohrdurchmesser 22 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |



# Artikelnummer-Übersicht

## Mini-Griff, senkrecht

| Art.-Nr.  | Beschreibung                        | Spezifikation                                                     |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 35035 158 | Mit 2 Universalanschlüssen 40/22 mm | Rohrdurchmesser 22 mm<br>Länge 75 cm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |



## Geländerrohr

| Art.-Nr. | Beschreibung                                             | Spezifikation                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 35321    | Universalanschluß ist separat zu bestellen               | 100 cm lang, Rohrdurchmesser 22 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |
| 35322    | Universalanschluß ist separat zu bestellen               | 100 cm lang, Rohrdurchmesser 40 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |
| 35323    | Mit Moosgumm, Universalanschluß ist separat zu bestellen | 100 cm lang, Rohrdurchmesser 22 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |
| 35152    | Universalanschluß ist separat zu bestellen               | 160 cm lang, Rohrdurchmesser 40 mm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |



## Klappsitz

| Art.-Nr.  | Beschreibung                            | Spezifikation                                          |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 35035 154 | Komplett mit Universalanschluß 40/40 mm | Breite 35 cm, Tiefe 40 cm<br>Max. Körpergewicht 110 kg |



## Armlehnen-Seitenstütze

| Art.-Nr. | Beschreibung                   | Spezifikation                                                    |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 35255    | Mit Universalanschluß 40/40 mm | Breite zwischen den Armlehnen 56 cm<br>Max. Körpergewicht 150 kg |



## Deckenabschlussplatte für Dachschräge

| Art.-Nr. | Beschreibung               | Spezifikation                      |
|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 35320    | Zur Montage in Dachschräge | Regulierbar<br>Dachwinkel 45° Grad |



## Deckenabschlussplatte für schwache Decken

| Art.-Nr.  | Beschreibung                | Spezifikation |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 35035 153 | Große obere Abschlussplatte | 70 x 31 cm    |



## Rechteckiger Tisch

| Art.-Nr.  | Beschreibung                   | Spezifikation           |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 35035 165 | Mit Universalanschluß 20/20 mm | Tischplatte, 41 x 31 cm |



## Griffbezug

| Art.-Nr. | Beschreibung                                         | Spezifikation                            |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 35298    | Für besseren Halt. Wird mit Reißverschluß befestigt. | Länge 20 cm<br>Für Rohrdurchmesser 40 mm |



## Bodenplatte "antirutsch"

| Art.-Nr. | Beschreibung             | Spezifikation     |
|----------|--------------------------|-------------------|
| 35007    | Bodenplatte "antirutsch" | Durchmesser 20 cm |



## Hängegriff für Stützbügel

| Art.-Nr. | Beschreibung                                    | Spezifikation                                               |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 35214    | Dies ist ein Zubehörprodukt für den Stützbügel. | Länge insgesamt: 32 cm. Griff: 29 x 24 cm (Breite x Länge). |



Tipp- und Druckfehler sind möglich.







# Unabhängigkeit • Sicherheit • Lebensqualität

HEPRO AS ist ein modernes und zukunftsorientiertes Technologieunternehmen, das qualitativ hochwertige Hilfsmittel, innovativste Technologie und modernes Design für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwickelt, fertigt und vertreibt. Unser Hauptsitz befindet sich in Rognan, Norwegen, mitten im Saltenfjord, umgeben von Bergen und mächtiger Natur.

Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Entwicklung von Produkten und Problemlösungen, die unseren Kunden den Alltag erleichtern. Unsere Vision ist es, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, für sich selbst zu sorgen, aktiv am Alltag teilzunehmen und länger zu

Hause zu leben. Dies und unser eigener Anspruch an eine hohe Qualität macht uns unserer Meinung nach zu einem wichtigen Lösungsanbieter für unsere Kunden.

In enger Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten entwickeln wir Produkte und Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden nach Mobilität, Gleichgewicht, Komfort und Hygiene zugeschnitten sind. Ziel ist es, durch funktionale und benutzerfreundliche Produkte Sicherheit, Alltagsbewältigung und erhöhte Aktivität zu ermöglichen. Wir gehen auf den einzelnen Benutzer ein und liefern Produkte, die auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

REV. 01. 2024

**RUSSKA**

**Vertrieb:**

Ludwig Bertram GmbH  
Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen  
Telefon: 05136/9759-0  
Fax: 05136-9759-555  
E-Mail: [info@russka.de](mailto:info@russka.de)  
[www.russka.de](http://www.russka.de)

**HEPRO**