

NAVIGATOR

ARTHRITIS ROLLATOR



DREHBAREN UNTERARMAUFLAGEN

Der einzigartige **Navigator** ist ein Rollator mit Unterarmauflagen, der speziell für Benutzer mit Arthritis und/oder eingeschränkter Funktion der Arme und Hände entwickelt wurde. Er ist mit sehr stabilen und komfortablen Unterarmauflagen ausgestattet, die in der Höhe verstellbar sind. Jetzt ist der **Navigator** ebenfalls als eine neue Version mit horizontal winkelverstellbaren Unterarmauflagen erhältlich, die optimale Einstellmöglichkeiten bieten, so dass jeder Benutzer ihn genau nach seinen Bedürfnissen einstellen kann, um die bequeme Handposition zu genießen. Für Benutzer, die einen Rollator mit Unterarmauflagen benötigen, ist der **Navigator** die beste Wahl. Für alle Details und Vorteile lesen Sie bitte die folgenden Seiten.



GEMEINSAME DETAILS & SPEZIFIKATIONEN



Die höhenverstellbaren Unterarmauflagen sind im Bereich von 75 - 115 cm (insgesamt für beide Rollatorgrößen) sehr einfach einstellbar.




Der Abstand von Mitte zu Mitte zwischen den Unterarmauflagen beträgt 47 cm. Es ist mit einem Gurt ausgestattet, um den oberen Teil zu stabilisieren. Der Gurt muss während des Gebrauchs angeschlossen sein.



Die tiefen und weich gepolsterten Unterarmauflagen bieten optimalen Armkomfort und Unterstützung für den Benutzer. Es besteht aus PU und ist 24 cm lang. Die Oberfläche ist abwaschbar und leicht zu reinigen.



Die Brems- und Schiebegriffe sind vollständig in die Unterarmauflagen integriert und in einem Bereich von 13 cm längenverstellbar.

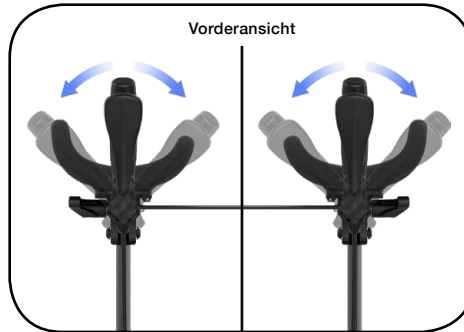


Die Schiebegriffe können gedreht werden, um die bequemste Position der Hand des Benutzers zu erreichen. Die Breite zwischen den Schiebegriffen beträgt 47 cm.



Die Handbremsen umfassen eine Feststellbremse. Ganz Geschmeidig und können mit sehr geringer Kraft betrieben werden. Zuverlässig und wartungsfrei.



Der Rollator kann mit dem einzigartigen A-Lock-System einfach ver- und entriegelt werden. Er faltet sich leicht, indem er den Zugband auf dem Sitz hochzieht. Er steht fest auf seinen Rädern und nimmt wenig Platz ein.

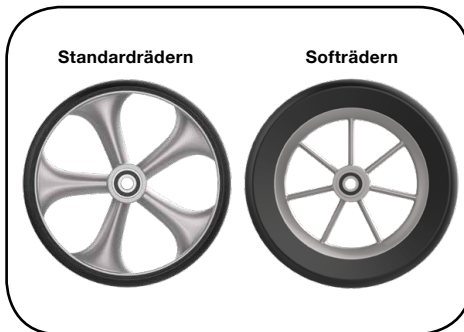

Der Navigator ist mit Standard- oder Softrädern erhältlich. Standardrädern werden mit schwarzen Gummireifen (TPE) und Softrädern mit schwarzen weichen PU-Reifen hergestellt.




Praktische Netztasche als Zusatzausführung zum Tragen von kleinen Gegenständen wie Medikamenten, Brillen, Schlüsseln usw.



Der Navigator ist auf beiden Seiten mit einem Fußpedal ausgestattet, um Schwellen und ähnliche Hindernisse leichter passieren zu können.



Der speziell entwickelte Aluminiumrahmen ist aus den anderen Rehasense-Rollator-Ausführungen bekannt. Der Navigator ist in 3 Farben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

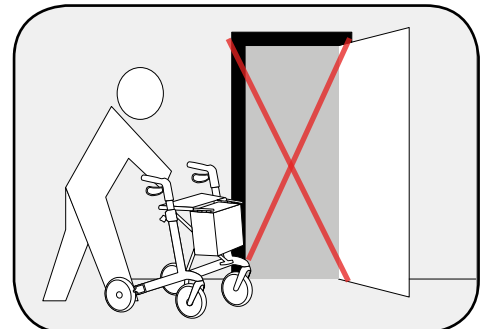


Der Navigator ist für den Einsatz auf flachen Oberflächen in Innenräumen konzipiert und zugelassen.



NAVIGATOR MIT DREHBAREN UNTERARMAUFLAGEN

Bietet optimalen Komfort & einzigartige Einstellmöglichkeiten (empfohlen)

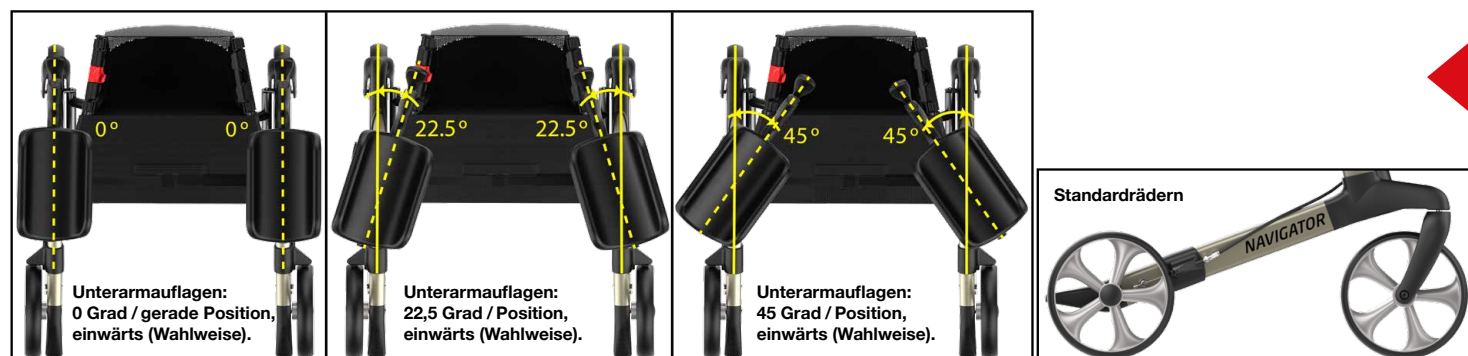

NEU

NAVIGATOR MIT STANDARDRÄDERN - Ø200 x 35 mm mit schwarzen Gummibereifung (TPE)


Farbe	Größe / Sitzhöhe	Sitzbreite	Gesamtgewicht ohne Tasche	Artikelnummer	Max Benutzer-gewicht	Gesamt-breite	Gesamt-länge	Gefaltet Breite	Drücken Griff Höhe	Höhe Einstellung Positionen
Champagner	L/62 cm	46 cm	9,9 kg	NRRCHL60	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	90-114 cm	10 Schritte

NAVIGATOR MIT SOFTRÄDERN - Ø200 x 35 mm mit schwarzen, hohen und weichen PU-Reifen

Farbe	Größe / Sitzhöhe	Sitzbreite	Gesamtgewicht ohne Tasche	Artikelnummer	Max Benutzer-gewicht	Gesamt-breite	Gesamt-länge	Gefaltet Breite	Drücken Griff Höhe	Höhe Einstellung Positionen
Champagner	L/62 cm	46 cm	10,1 kg	NRRCHL60UP	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	90-114 cm	10 Schritte

HILFSMITTELNUMMER: XX.XX.XX.XXXX

NAVIGATOR MIT FESTER UNTERARMAUFLAGEN

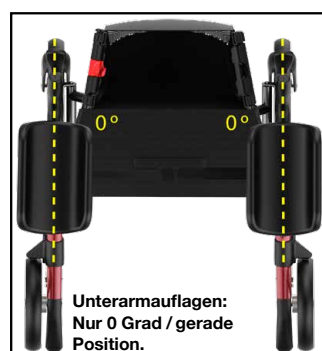

NAVIGATOR MIT STANDARDRÄDERN - Ø200 x 35 mm mit schwarzen Gummibereifung (TPE)

Farbe	Größe / Sitzhöhe	Sitzbreite	Gesamtgewicht ohne Tasche	Artikelnummer	Max Benutzer-gewicht	Gesamt-breite	Gesamt-länge	Gefaltet Breite	Drücken Griff Höhe	Höhe Einstellung Positionen
Anthrazit Grau	L/62 cm	46 cm	9,4 kg	NRSG600	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	90-115 cm	10 Schritte
Weinrot	L/62 cm	46 cm	9,4 kg	NRWRL600	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	90-115 cm	10 Schritte
Anthrazit Grau	M/55 cm	46 cm	9,2 kg	NRSGM550	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	75-98 cm	7 Schritte

NAVIGATOR MIT SOFTRÄDERN - Ø200 x 35 mm mit schwarzen, hohen und weichen PU-Reifen

Farbe	Größe / Sitzhöhe	Sitzbreite	Gesamtgewicht ohne Tasche	Artikelnummer	Max Benutzer-gewicht	Gesamt-breite	Gesamt-länge	Gefaltet Breite	Drücken Griff Höhe	Höhe Einstellung Positionen
Anthrazit Grau	L/62 cm	46 cm	9,6 kg	NRSG600UP	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	90-115 cm	10 Schritte
Weinrot	L/62 cm	46 cm	9,6 kg	NRWRL600UP	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	90-115 cm	10 Schritte
Anthrazit Grau	M/55 cm	46 cm	9,4 kg	NRSGM550UP	150 kg	63 cm	67 cm	28 cm	75-98 cm	7 Schritte

HILFSMITTELNUMMER: 10.50.04.1199



REHASENSE

ERHÄLTLICHES FARBE:

MIT DREHBARE UNTERARMAUFLAGEN

NAVIGATOR MIT FESTEN UNTERARMAUFLAGEN

Champagne



Anthrazit Grau



Weinrot



ZUBEHÖR


Für Ihren Rollator gibt es eine große Auswahl an Zubehör, so dass Sie es für Ihre Bedürfnisse genauso anpassen können, um noch mehr Komfort und Funktionalität zu erhalten. Wir fokussieren uns ständig auf die Innovation und Entwicklung neuer Produkte, damit Sie weiterhin aktiv bleiben können. Unsere Kunden sind uns wichtig und Ihr Feedback und Ihre Ideen sind immer willkommen. Fragen Sie Ihren Händler vor Ort nach einer Demonstration.



Netzttaschen




Stockenhalter

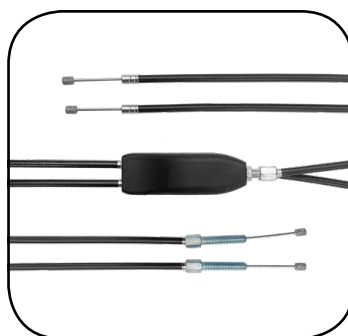

Einhandbremsen



Tablett

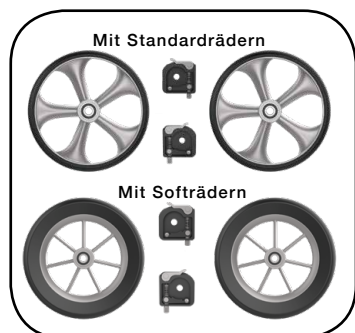

Schleppbremsen



Taschen mit Deckel



Infusionsständer



Sauerstoffflaschenhalter



Getestet und
genehmigt nach den
ISO 11199-3:2008

Ver 1 - 01 - 2019